

ICLS救急時計 設定ガイド（ブラウザ版）

ICLS救急時計 ブラウザ版 v1.1.1-html（2026-10-09 版）

設定を決める人、変える人のための冊子です。日々の操作は「かんたん操作マニュアル」に載っています。記録係が、この冊子を読む必要はありません。

はじめに

- 設定は、**変えなくても使えます**。初期値のままで運用できます
- 変えるときは、部署で決めてから変えます。変えたら、使う人に知らせます
- 設定は、**その端末の、そのブラウザの中に保存されます**。別の端末には引き継がれません。全端末で同じ値にしたいときは、端末ごとに設定します
- 変えた内容は、すぐ反映されます。「保存」を押す必要はありません（定型文を除く）

設定を開く

画面下部の「 設定」を押します。



設定画面のスクリーンショット。画面は暗いテーマで、設定項目がリストアップされています。項目には「アドレナリン目標」「アドレナリン通知の文言」「2分サイクル通知の文言」「音声の速さ」「音声の声」「保存期間（日数）」があります。それぞれに値を設定できる入力フィールドやスライダー、プルダウンメニューがあります。音声の速さはスライダーで1.25に設定されています。音声の声は「自動選択」で、右に「試し聞き」ボタンがあります。保存期間は「7」日です。画面下部には「F11で全画面にすると画面を広く使えます」というヒントがあります。

設定の項目

項目	選べるもの	初期値	変えるとうなるか
アドレナリン目標	3分・4分・5分	4分	アドレナリン経過の色の境目と、「じかん、です」が流れる時刻が変わります。時計の見出しにも、目標の分数が出ます
アドレナリン通知の文言	自由な言葉	じかん、です	目標の時間になったとき、1回だけ流れる言葉です
2分サイクル通知の文言	自由な言葉	リズムチェック	2分ごとに流れる言葉です
音声の速さ	スライダー（0.5～2）	1.25	大きいほど速く話します
音声の声	日本語の声の一覧	自動選択	「試し聞き」で、選んだ声と速さを確かめられます
保存期間（日数）	0～90	7	過ぎた記録は、次に開いたときに自動で消えます。0にすると、自動では消えません

このほかに、下部の「🔊 音」を押すと、音声の ON・OFF を切り替えられます。この切り替えも、端末ごとに保存されます。

音声を設定する

1. 「🔊 設定」を開きます
 2. **音声の声** で、日本語の声を選びます。「端末内蔵」と付いた声を選びます。「Online」と付いた声は、通信できない環境で鳴らないことがあります
 3. 「**試し聞き**」を押して、聞こえかたを確かめます。流れるのは、「2分サイクル通知の文言」です
 4. **音声の速さ** を、聞き取りやすい速さに合わせます
 5. 言葉を変えるときは、2つの通知の文言の欄を書き換えます
- 声の種類と聞こえかたは、パソコンによって違います。**実際に鳴らして確かめてから使います**
 - 日本語の声がない端末では、画面の上に「日本語の音声が見つかりません」と出て、ピープ音で代用されます
 - 設定を変えたあとは、CPR開始から2分待って、実際の音を一度聞いておくと確実です


定型文を変える

メモ窓の「**定型文を編集**」を押します。

1. 15行の入力欄が出ます。使いたい言葉を入れます。今ある言葉を書き換えても構いません
 2. 空欄の行は、登録されません
 3. 一番下の「**保存**」を押します
 4. メモ窓のボタンが、その場で入れ替わります。再読み込みは要りません
- 登録できるのは15個までです
 - 初期値は5個です。「家族到着」「家族へ説明」「DNAR確認」「他院より情報あり」「蘇生中止を相談」
 - 定型文は、どの症例でも使える言葉にします。患者さん個人の情報は入れません

記録を管理する

画面下部の「**症例の管理**」で、残っている記録を一覧できます。

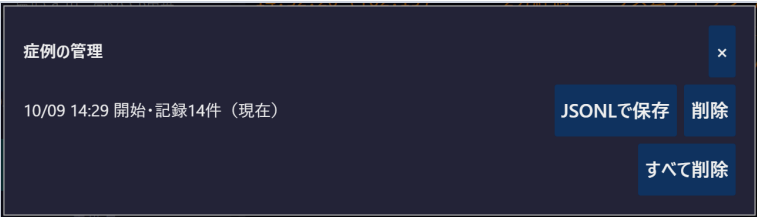

ボタン	動き
JSONLで保存	その症例の記録を、控えのファイルに書き出します
削除	その症例の記録を消します。 元に戻せません 。確認が出ます
すべて削除	残っている記録を、すべて消します。 元に戻せません 。確認が出ます

- 保存期間を過ぎた記録は、次に開いたときに自動で消えます（初期値7日）
- 書き出したファイルには、患者さんの情報が入っています。ダウンロードしたフォルダに置いたままにせず、部署で決めた場所で扱います
- 共用のパソコンでは、使い終わった症例を削除する運用を決めておきます

設定や記録が消えるとき、初期値に戻したいとき

- ブラウザの「閲覧データの削除」で、「Cookie とその他のサイト データ」を消すと、記録も、**設定と定型文も消えて、初期値に戻ります**
- プライベートウィンドウ（InPrivate・シークレット）では、閉じると記録も設定も消えます。使いません
- Edge の「ブラウザーを閉じるたびにクリアするデータを選択」で、「Cookie とその他のサイト データ」が選ばれている端末では、閉じるたびに記録も設定も消えます。システム担当に相談します
- 初期値に戻すボタンはありません。戻したいときは、上の表の初期値を入れ直します。定型文は、初期の5個を入れ直します

部署で決めた設定（記入欄）

項目	初期値	部署で決めた値
アドレナリン目標	4分	
アドレナリン通知の文言	じかん、です	
2分サイクル通知の文言	リズムチェック	
音声の速さ	1.25	
音声の声	自動選択	
保存期間（日数）	7	
定型文（15個まで）	初期の5個	

決めた日： 年 月 日 決めた人：

※ 表示される用量とタイミングは目安です。臨床判断は、必ず医師が行います。※ 記録の正本は診療録です。